

A woman with blonde hair tied back, wearing white medical scrubs, is holding a small, white, rectangular infusion pump. The pump has a clear reservoir on top and a black display screen on the front. The screen displays "SO*CONNECT+ V1.0". The pump is held in front of her chest with both hands. The background is plain white with a faint, light-colored decorative line on the left side.

SO*CONNECT+

Infusionspump för
subkutan behandling
i hemmet – med den
nya generationens
teknologi

nordic
INFUcare

SO♥CONNECT+ en bärbar infusionspump för subkutan* infusionsbehandling. En pump till tre sprutstorlekar: 20, 30 och 50 ml.



ANVÄNDARVÄNLIG

Intuitiv design för smidig hantering



FLEXIBEL

3-i-1, en pump till tre sprutstorlekar



SMART TEKNOLOGI

Touchscreen och bluetooth**



73 83 15
SO♥FILL 30ml 32st/frp



73 83 16
SO♥FILL 50ml 32st/frp



73 83 14
SO♥FILL 20ml 32st/frp



STÄLL IN PUMPEN

Via enkla steg ställer du in mängden läkemedel samt hur lång tid behandlingen ska ta.



DRA UPP LÄKEMEDEL I SO*FILL SPRUTAN

so*FILL har ett stopp runt kolvstången som förhindrar läkemedel att rinna ut från sprutan.



ANSLUT SPRUTAN

Med ett enkelt handgrepp fäster du sprutan på pumpen.



STARTA BEHANDLINGEN

Tryck på STARTA för att komma igång med infusionen.

Saknas sprutan utlöses ett larm.

För mer
information:
info@infucare.se
08-601 24 40

SO♥CONNECT+

TRE SPRUTSTORLEKAR

SO♥FILL 20, 30 och 50 ml

SENSOR FÖR SPRUTAN

Pumpen larmar om
sprutan saknas.

TOUCHSCREEN

Följ behandlingen med
tid och kvarvarande volym.



STANDARD LUERKOPPLING

Passar alla infusionsset
med standardkoppling.

LADDNINGSBART BATTERI

SO♥POWER+ med
extern uppladdning.

UNDERHÅLL

Inget förebyggande
underhåll krävs.

SO♥CONNECT+ STARTKIT

vrn: 91 00 50

LADDARE

Inklusive kabel, 1st

FÖRENKLAD ANVÄNDAR- MANUAL

Fyra nordiska
språk, 1st

BATTERI


SO♥POWER+
3.7V litium, 2 st

PUMP

SO♥CONNECT+
Infusionspump

USB-MINNE

SO♥KEY+
Innehållande
bruksanvisning, 1st

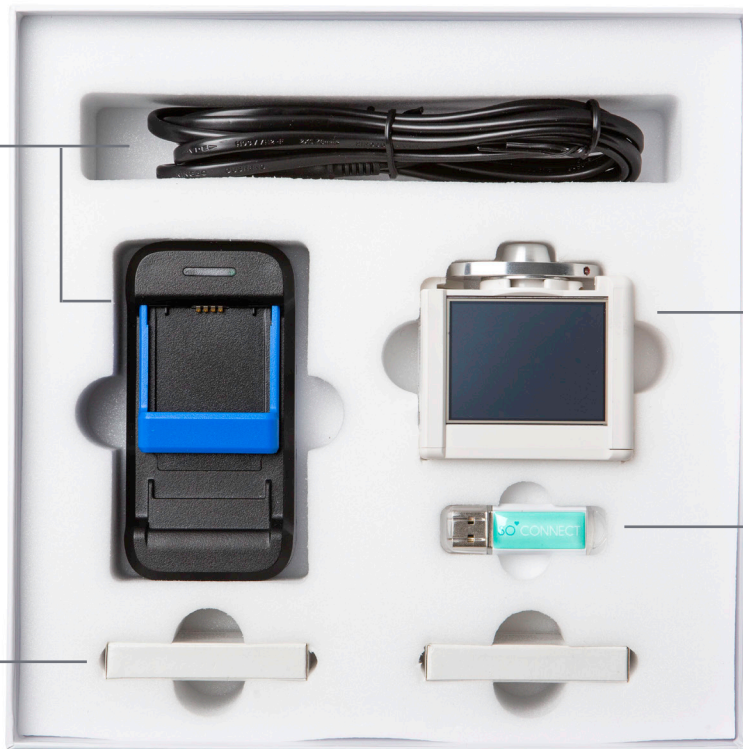

TILLBEHÖR*

SO♥MOVE+ pumpväska | nackrem | elastiskt midjeband | SO♥EASY uppdragningskruv

*Beställs separat



Nordic Infucare erbjuder en unik kombination av medicin-teknisk utrustning, läkemedel och kunskap för barn och vuxna i deras hemmiljö. Våra team har lång erfarenhet av olika aspekter av subkutan läkemedelsbehandling. Nordic Infucare fokuserar på kroniska och sällsynta sjukdomar som immunbrist, transfusionskrävande anemier, diabetes, Parkinson, Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH), smärta, dialys och andningshjälpmedel.

DANMARK: Vandtårnsvej 62A, 1 sal E • 2860 SØBORG • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk

FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 20 734 87 60 • info@infucare.fi

NORGE: Gaustadalléen 21 • 0349 OSLO • +47 22 20 6000 • info@infucare.no

SVERIGE: Gustavslundsvägen 12, 3 tr, 167 14 BROMMA • +46 8 601 2440 • info@infucare.se



www.infucare.com